

7 イメージタイトル、ツールバー、メニューのカスタマイズ

イメージタイトルバーを変更するには

1: Color = 234,795 バイト

タイトルバーには、イメージ名、サイズ、番号がリストされます。新規スキャンには、番号とファイルサイズが割り当てられますが、イメージの名前を変更することによって、この情報をカスタマイズすることができます。

- 1 イメージタイトルバー上で右クリックします。
- 2 [イメージ プロパティ] を選択します。
- 3 新しいタイトル情報 (ファイル名、説明など) をテキストボックスに入力します。
- 4 [OK] をクリックします。新しいタイトルバーが表示されます。


ツールバーを表示/非表示にするには

[オプション]メニューから[ツールバー]を選択します。



メニューバーを表示/非表示にするには

[オプション]メニューから[メニューバー]を選択します。

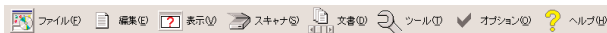

単一のボタンとしてメニューを表示するには

[オプション]メニューから [単一ボタンメニュー] を選択します。

フルメニューとしてメニューを表示するには

- 1 [単一ボタンメニュー]メニューから [オプション] を選択します。
- 2 [全メニュー] を選択します。

大きいアイコンまたは小さいアイコンを表示するには

[オプション]メニューから [大きいアイコン] または [小さいアイコン] を選択します。

Kofax Scan Demo の言語を選択するには

Kofax Scan Demo のデフォルト言語は日本語ですが、他の言語も用意されています。

- 1 ツールバーの[ファイル]メニューから旗のアイコンで示される言語を選択します。
— または —
ショートカット キー Alt + L を押して、アイコンを選択します。


8 ショートカット

1 イメージを表示	1
2 イメージを表示	2
4 イメージを表示	4
6 イメージを表示	6
12 イメージを表示	T
詳細設定	Ctrl + A
クリップボードに選択範囲のイメージをコピー	A
クリップボードにイメージをコピー	C
イメージを削除	Del
最初の画面を表示	Home
最後の画面を表示	End
文書メニュー	Alt + D
編集メニュー	Alt + E
ファイルメニュー	Alt + F
最初のイメージ	Home
移動先のイメージを指定	G
ヘルプメニュー	Alt + H
横に合わせる	H
イメージスキャン プロパティ	Ctrl + I
最後のイメージ	End
デフォルトのデモ イメージをロード	Ctrl + D
イメージを移動	M
次の画面	Page Down
オプションメニュー	Alt + O
画面に合わせる	P
前の画面	Page Up
90° 回転	Shift + →
180° 回転	Shift + ↑
270° 回転	Shift + ←
1 ページをスキャン	Space
文書をスキャン	Enter
スキャナメニュー	Alt + S
スキャナ設定	Ctrl + S
イメージを下にスクロール	↓
イメージを左にスクロール	←
イメージを右にスクロール	→
イメージを上スクロール	↑
スクロールツール	S
停止	Esc
ツールメニュー	Alt + T
縦に合わせる	V
表示メニュー	Alt + V
四角形でズーム	R
ズームイン	+
ズームアウト	-
拡大鏡でズーム	Z



○ 主な機能

- 1 ツールのヒント
- 2 スキャンニング
- 3 イメージのロード/スキャナの選択および変更
- 4 イメージの表示エリアの調整
- 5 ズームとスクロール ツール
- 6 イメージの印刷
- 7 イメージタイトル、ツールバー、メニューのカスタマイズ
- 8 ショートカット

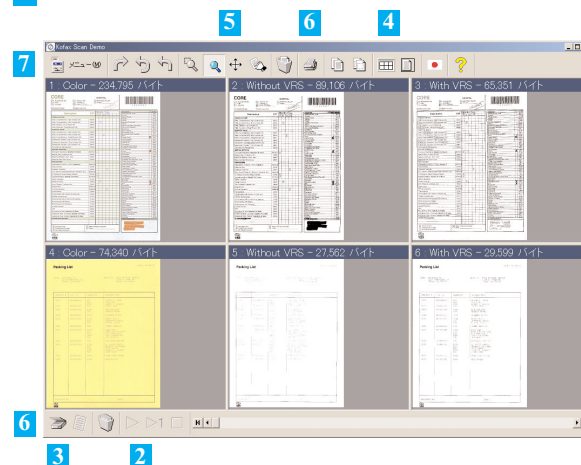

1 ツールのヒント


ポインタをツールまたはメニューアイテム上に置くと、その機能を説明するテキストが表示されます。



2 スキャンニング

スキャンニングに関連する機能は次のとおりです。

- 複数のドキュメントをスキャンするには [すべてのページをスキャン] アイコンを選択します。
- 1 ページのみスキャンするには [1 ページをスキャン] アイコンを選択します。
- スキャンを停止するには [スキャンの停止] ボタンを選択します。

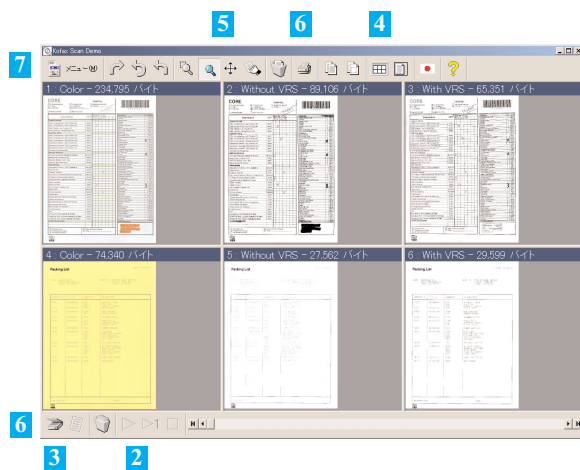

3 イメージのロード/スキャナの選択 および変更

スキャナを選択/変更するには

- 1 スキャナ バーで [スキャナ オプション] メニューをクリックします。
- 2 [Select Scan Source] ダイアログ ボックスで、ドロップダウンリストからスキャナ名を選択します。
- 3 [OK] をクリックします。

デフォルトのデモ イメージをロードするには

- 1 スキャナ バーで [スキャナ オプション] メニューをクリックします。
- 2 [デフォルトのデモ イメージをロード] を選択します。

イメージをインポートするには

- 1 スキャナ バーで [スキャナ オプション] メニューをクリックします。
- 2 [ファイルをロード] をクリックします。
- 3 インポートするファイルを選択します。
- 4 [開く] をクリックします。

4 イメージの表示エリアの調整

最初、または最後のページを表示するには

- 1 ナビゲーション スライダー バーで矢印の隣にあるボタンを選択します。
— または —
- 2 Home か End キーを押します。

前の画面、または次の画面を表示するには

- 1 ナビゲーション バーの矢印をクリックします。
— または —
- 2 PageUp か PageDown キーを押します。

画面に表示されるイメージの数を変更するには

- 1 [表示モードの選択] メニューを選択します。
- 2 イメージの数を選択します。
— または —
- 3 1、2、4、6、T のいずれかのキーを押します。

[表示合わせモードの選択] を変更するには

- 1 [表示合わせモードの選択] で、[横に合わせる]、[縦に合わせる]、あるいは [画面に合わせる] を選択します。
— または —
- 2 H、V、あるいは P のキーを押します。

イメージを回転するには

- 1 90、180、または 270 度の回転ツールを選択します。
- 2 回転するイメージをクリックします。

1つのイメージを削除するには

- 1 [イメージを削除] ツールを選択します。カーソルがごみ箱に変わります。
- 2 削除するイメージをクリックします。
- 3 ダイアログ ボックスで [OK] をクリックして削除を確認します。

すべてのイメージを削除するには

- 1 スキャナ バーで [現在の文書を削除] を選択します。
- 2 [OK] をクリックします。

5 ズームとスクロール ツール

ズームを使用するには

- 1 [四角形でズーム] ツールを選択します。
- 2 エリアをクリックし、ドラッグします。
- 3 イメージ全体を表示エリアに合わせるには P を押します。



拡大鏡を使用するには

- 1 [拡大鏡でズーム] ツールを選択します。
- 2 イメージをクリックして、マウスのボタンを押したままにします。
- 3 虫メガネのようにマウスを使用してください。
- 4 停止するにはマウス ボタンを離します。

拡大鏡のプロファイルを設定するには

- 1 [拡大鏡でズーム] ツールを選択して、イメージ上で右クリックします。
- 2 [拡大プロパティ] を選択し、数値を選択します。
- 3 スライダーを使って、虫メガネの形を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。

イメージを拡大または縮小するには

- 1 イメージを選択します。
- 2 プラスサイン キー (+) または マイナスサイン キー (-) を押して、必要なイメージ サイズに変更します。
- 3 イメージ全体を表示エリアに合わせるには [画面に合わせる] のショートカット P を押します。

スクロール ツールを使用するには

- 1 [四角形でズーム] ツールでエリアを選択します。
- 2 [スクロール] ツールを選択します。
- 3 イメージをクリックしてドラッグすると、そのエリアが表示されます。
- 4 イメージ全体をウィンドウに合わせるには [画面に合わせる] のショートカット P を押します。

イメージをスクロールして同じ位置にするには

- 1 [四角形でズーム] ツールを使って、イメージ エリアを選択します。
- 2 イメージ上で右クリックします。
- 3 [イメージを同じ位置にスクロール] を選択します。

6 イメージの印刷

イメージを印刷するには

- 1 [ツール] メニューから [印刷] を選択します。カーソルがプリンタに変わります。
- 2 印刷するイメージをクリックします。